

OFERTA

Equipos Precellys®

Homogeneización de tejidos para una preparación de muestras reproducible y eficiente

Los homogeneizadores Precellys® utilizan la tecnología de batido de perlas multidireccional (3D bead-beating) para homogeneizar todo tipo de muestras biológicas: tejidos humanos, animales o vegetales, bacterias, etc. Precellys® optimiza la extracción de las moléculas de interés (ácidos nucleicos, proteínas, metabolitos) y su análisis mediante diferentes técnicas de análisis: PCR, secuenciación, Western Blot, cromatografía líquida, etc.

Precellys® 24TOUCH


- ✓ Máxima Eficiencia: potente movimiento 3D - 6800 rpm.
- ✓ 1- 24 tubos de 0,5 – 2ml.
- ✓ Alta calidad: robusto, ergonómico y seguro.
- ✓ Sistema de vacío patentado para mayor velocidad y seguridad.
- ✓ Cryo-grinding.
- ✓ Reducción de ruido y vibración < 70db.
- ✓ Fácil de usar: pantalla táctil y bloqueo del tubo.
- ✓ Reproducible: protocolos validados disponibles en línea.



Click para ver el vídeo de uso

8.850€
~~9.800€~~

Para todo tipo de muestras:

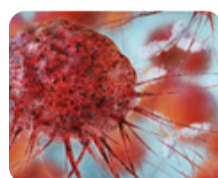

Células cancerosas hA



Agrícolas



Forenses



Farmacéuticas



Ambientales



Microbiológicas

Precellys® EVOLUTION



Click para ver el vídeo de uso

11.250€
~~12.500€~~

- ✓ 5.000- 10.000 rpm (de 100 en 100).
- ✓ Adaptado a cualquier volumen de tubo: 0,5-2-7-15-50 ml.

Precellys® MINILYS



Click para ver el vídeo de uso

2.500€
~~2.700€~~

- ✓ 2000/ 3000 / 4000 rpm.
- ✓ Homogeneizador personal para 1 - 3 muestras.

Precellys® CRYOLYS EVOLUTION

- ✓ Homogeniza tus muestras más sensibles a 4°C y no corras ningún riesgo.
- ✓ Control de temperatura con el software de Precellys Evolution
- ✓ Extracción de moléculas termosensibles en estado nativo como ARN activo, siARN, metabolitos, enzimas...

Basado en la sublimación con hielo seco mantiene la temperatura entre 0 y 10°C antes y durante de la homogeneización del tejido.



Click para ver el vídeo de uso

17.500€
~~19.900€~~



Referencia mundial en la homogeneización de tejidos

- ✓ Una gama completa de homogeneizadores versátiles y ergonómicos.
- ✓ 20 años de experiencia en la preparación de muestras.
- ✓ Un centro de aplicaciones único con una enorme base de datos incluyendo protocolos, notas de aplicación y publicaciones.
- ✓ Un soporte científico para optimizar sus resultados.



¿Quieres verlo en acción en tus instalaciones?

Contacta con nosotros para solicitar una demostración sin compromiso. Puedes hacerlo llamando al especialista de producto o enviar un email directamente escaneando el QR.

Victor Nájera - Product Specialist
victor.najera@nirco.com - T. 637 785 699
www.deltalabgroup.com



Click para enviar email